

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

透镜

棱镜

偏光镜

激光器

光束整形

滤光片

快门

其它

光纤

在转换轮上安装多个滤光片，通过转动转换轮切换插入光轴中的滤光片。在滤光片转换轮上安装透射率不同的中性滤光片，可以切换透过光量，安装不同的彩色滤光片可以切换透过波长。

- 提供可切换六档的单层滤光片转换轮 (NDWH-15S) 和可切换六档的双层滤光片转换轮 (NDWH-15W)。
- 有可直接固定的 (NDWH-15S/NDWH-15W) 和立柱型的 (NDWH-15SRO/NDWH-15WRO) 两大类。
- 转换轮上每30度有一个止动机构 (停止位置)。借助此止动机构，滤光片转换轮可很容易地停止在0度，30度，60度，90度等位置。



信息

- ▶ 滤光片转换轮不包含中性滤光片 (ND)。请从 (AND-15C/FND-15C02) 型号中选购需要的中性滤光片。 [参阅](#) B213
- ▶ 提供可连续改变透过光量的旋转式反射可变 (ND) 中性滤光片固定轮 (NDHN)。 [参阅](#) B224
- ▶ 万一丢失了滤光片镜框，或需要备用的滤光片镜框时请咨询。
- ▶ 承接改变NDWH-15SRO, NDWH-15WRO立柱长度的业务。在购买镜架时，客户可指定立柱的长度。更改立柱长度通常是免费的，但如果更改前后的立柱长度相差太大的话，也会收取一定的差额费用的，详情请咨询。

注意


- ▶ 在转换轮的最下方使用滤光片时，镜架的立柱会遮挡光束。而其他位置的滤光片都可以让光束完全通过。
- ▶ 拆卸滤光片套筒时，需要用到专用工具。卸掉滤光片套筒，安装 $\phi 25.4\text{mm}$ 的滤光片的话，需要另外准备螺纹环 (NR-25.4)。详情欢迎咨询。
- ▶ 立柱型滤光片转换轮的安装位置，相对光轴有一定的偏移量，而且使用的转换轮孔位不同，其偏移量也不同。



外形图


NDWH-15S
NDWH-15SRO

内六角螺栓 M6×8...2个
M6 P1

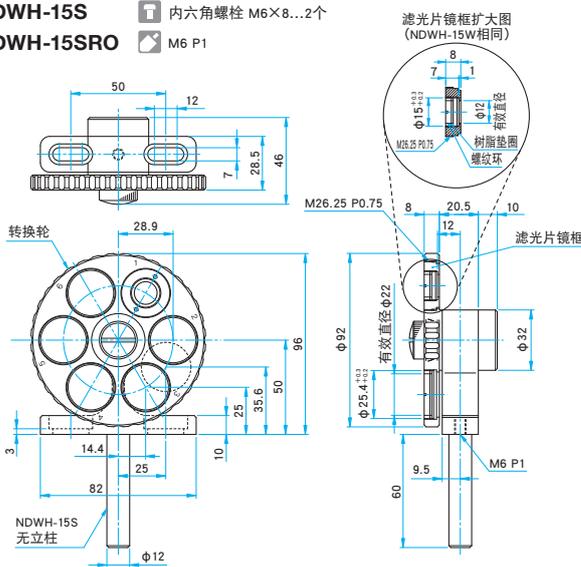

NDWH-15W
NDWH-15WRO

内六角螺栓 M6×8...2个
M6 P1

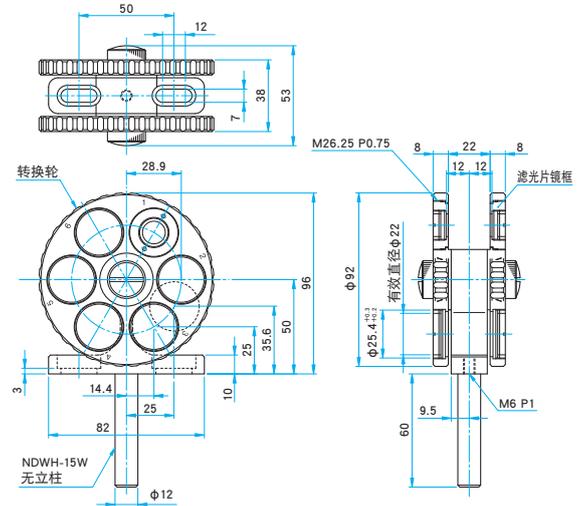

技术指标

型号	选购件编码*	适用元器件尺寸 (mm)	适用元器件最大厚度 (mm)	最大安装数量 (个)	自重 (kg)
NDWH-15S	EE/UU	$\phi 15$	3	6	0.2
NDWH-15SRO	—	$\phi 15$	3	6	0.26
NDWH-15W	EE/UU	$\phi 15$	3	12	0.34
NDWH-15WRO	—	$\phi 15$	3	12	0.4

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化